

# МАСАЖЕН СТОЛ

## Beurer MC 3800

### Кратко ръководство на потребителя

#### 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Чрез този масажор може да получите успокояващ и ефективен масаж у дома. Масажите могат да бъдат релаксиращи или стимулиращи и да ви помогнат в случаите на напрежение и болки в ставите и мускулите.
- Този масажор разполага с три масажни програми, които се фокусират върху различни зони на тялото.
- В допълнение масажорът предлага и вибриращ масаж в зоните на седалището и прасците ви.

#### 2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът е предназначен за употреба само върху хора за масажирание на гърба и краката.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Използвайте този уред само с посоченото токово напрежение.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Не използвайте уреда или неговите аксесоари, ако са видимо повредени или не функционират правилно.
- Не използвайте уреда, ако го напръскате с вода по невнимание.
- Не използвайте уреда по време на гръмотевична буря.
- При повреда изключете уреда от бутона, а след това и от електрическата мрежа.
- Не изключвайте уреда от контакта като дърпате охранващия кабел.

- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Този уред трябва да се използва само за масаж на посочените в това упътване зони (крака и гръб). Не бива да използвате този уред в следните случаи:
  - при промени, предизвикани от гръбначни заболявания или наранявания (напр. дискова херния, открити рани);
  - при бременност;
  - по време на сън;
  - върху животни;
  - по време на извършване на дейности, при които внезапна реакция би била опасна;
  - при приемане на вещества, които забавят реакциите (болкоуспокоителни, алкохол и др.);
  - ако не сте сигурни, че този уред е подходящ за вас. В подобни случаи се консултирайте с лекар.
- Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда:
  - ако страдате от някакво заболяване или се възстановявате от операция в горната част на тялото;
  - ако имате поставен пейсмейкър или имплант;
  - при тромбози, диабет или болки с неустановен характер;
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Дръжте опаковката на уреда далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Редовно проверявайте и почиствайте вентилационните отвори на масажора от прах, косми, коса и тн.
- Не използвайте този уред в комбинация с други електрически уреди – например по едно и също време с електрическа завивка.
- Не използвайте уреда, ако той или някоя от частите му са видимо повредени.
- Ако охранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.


- Уредът и кабелът му трябва да се ремонтират само от оторизиран технически персонал.
- Не дърпайте уреда за хранящия кабел.
- Не забивайте игли или други остри предмети в уреда.
- Уверете се, че уредът, превключвателят, хранящото и кабелът нямат досег с вода, пара или други течности.
- Използвайте уреда само на закрито – в сухи помещения, като го пипате само с напълно сухи ръце.
- Не изпускайте уреда и го пазете от удари и други повреди.
- Не отваряйте ципа на уреда. Той е сложен само по технически производствени причини.
- Не използвайте уреда в близост до леснозапалими вещества.
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го водете от електрическото храняване.
- Не слагайте никакви предмети в отворите на устройството или в подвижните му части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно по всяко време. Внимавайте пръстите ви да не попаднат в движещите се части по време на работа.
- Никога не стойте прави върху уреда и не поставяйте предмети върху него.
- Никога не масажирате места на тялото си по които има следи от екзема, подувания или инфекции.
- Не използвайте уреда, ако почувствате необясними стомашни болки.
- Максималното допустимо тегло върху този масажор е 150 кг. Никога не надвишавайте този лимит.
- Дръжте уреда далеч от високи температури (над 40°C).
- Не бива по едно и също време повече от един човек да използват този масажор.
- Не излагайте този уред на директна слънчева светлина.
- Ако не сте използвали този уред дълго време, моля проверете дали функционира правилно преди да го използвате отново.

### 3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

#### Масажен стол:

1. Възглавница
2. Облегалка за гръб
3. Подлакътници
4. Ръчен превключвател с отделение за батерии
5. Възглавница за седалка

6. Облегалка за крака
7. Главен превключвател
8. Гнездо за храняване
9. Масажни глави
10. Точки за вибрационен масаж

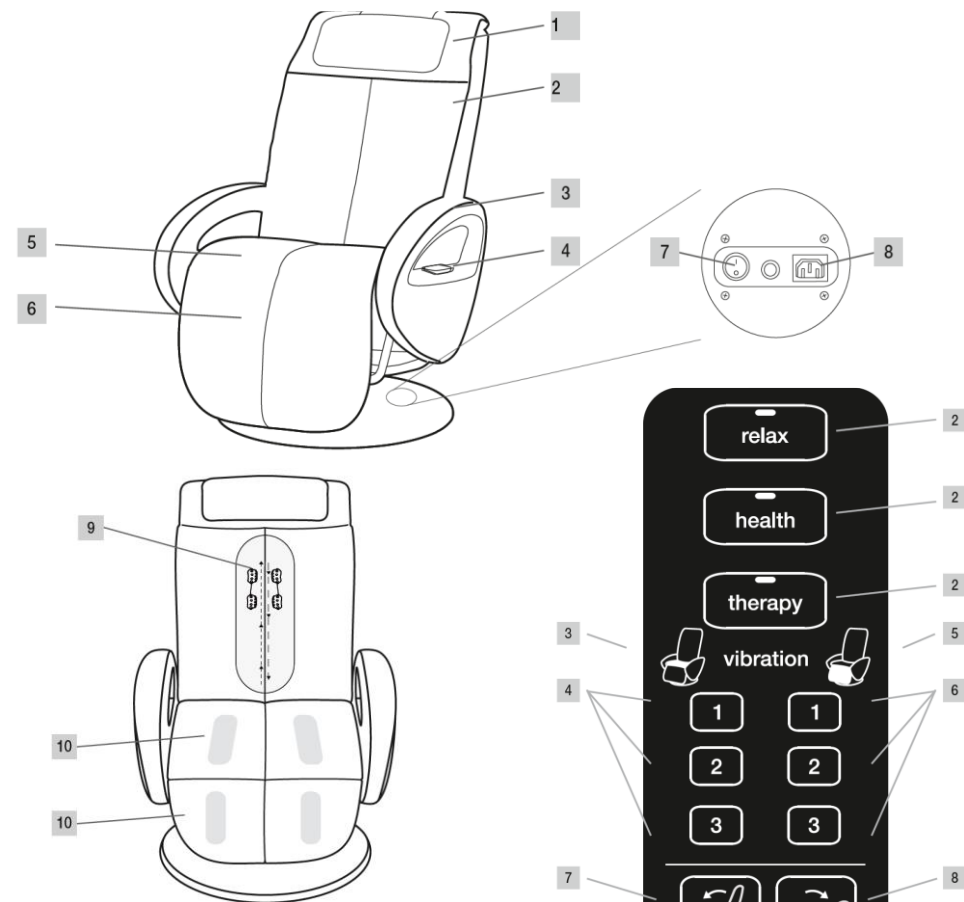

#### Ръчен превключвател:

1. Бутон за ВКЛ/ИКЛ
2. Автоматични масажни програми
3. Вибрационен масаж на седалка
4. Интензивност на вибрационен масаж
5. Вибрационен масаж на прасци

6. Интензивност на вибрационен масаж
7. Вдигане на облегалката за гръб и снижаване на облегалката за крака
8. Снижаване на облегалката за гръб и вдигане на облегалката за крака

#### 4. ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА РЪЧНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

##### Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ



Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ

Масажният стол се включва, облегалката за гръб се накланя, а облегалката за крака се вдига.

##### 4.1 Масажни програми

- След като даден масаж приключи, массажният стол остава в позицията, която вие сте задали.
- Масажът може да бъде спряен по всяко време чрез натискане на бутон за ВКЛ/ИЗКЛ.
- Светлинният LED индикатор показва коя масажна програма сте избрали в момента – Релакс, Здраве или Терапия.

##### 4.2 Автоматични масажни програми

- Има три автоматични масажни програми – Релакс, Здраве или Терапия. Тези автоматични програми масажират целия ви гръб чрез комбинация от елементи на мачкане, натискане, плъзгане и шиациу масажиране.

##### Релакс





Натиснете бутона Релакс

Автоматичната програма започва. След 15 минути на работа, програмата свършва, а массажният стол остава в позицията, която вие сте задали.

##### Здраве и Терапия


Повторете същите стъпки за автоматичните масажи

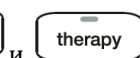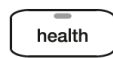


##### 4.3 Вибрационни масажи/интензивност



Има три нива на интензивност на вибрационния масаж в зоната на седалището: ниско (1), средно (2) и високо (3).

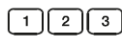

Има три нива на интензивност на вибрационния масаж в зоната на краката: ниско (1), средно (2) и високо (3).

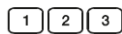

**Важно:** Имайте предвид, че вибрационният масаж е възможен само когато друга масажна програма не е избрана. За да изберете вибрационния масаж трябва да сте деактивирали вече избраната масажна програма.

За да активирате вибрационният масаж натиснете бутона за интензивност на вибрационния масаж. За да деактивирате вибрационния масаж, натиснете бутон повторно.

##### 4.4 Бутони за позициониране във вертикално и хоризонтално положение

Тези функции са достъпни, когато програма за масаж е включена или е изключена.



##### Облегалка за гръб нагоре и облегалка за крака надолу

Натиснете този бутон веднъж, а след това втори път, за да фиксирате желаната от вас позиция на стола.




##### Облегалка за гръб надолу и облегалка за крака нагоре


Натиснете този бутон веднъж, а след това втори път, за да фиксирате желаната от вас позиция на стола.

#### 5. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА




- Прочетете тези инструкции за употреба внимателно преди да използвате уреда за първи път.
- Махнете всички опаковки от стола и се уверете, че са далеч от обсега на деца, тъй като представляват опасност от задушаване.
- Поставете масажора върху твърда, равна и издръжлива повърхност. Сложете го така че да има място за движение на облегалката за гръб и крака.
- Имайте предвид, че массажният стол може да повреди пода ви (например да надраска паркета ви), така че препоръчваме да използвате подходящо покритие, което не се пързала под самия масажор.
- Извадете стола от картонения кашон в който идва. Внимавайте да не го повредите или нарежете, когато отваряте/срязвате кашона. За целта го хванете за обозначените места. За целта са необходими 2 човека.
- Сложете два броя AAA батерии в отделението за батерии, което се намира в задната част на ръчния превключвател.
- Разтворете облегалката докато не застане в изправено положение – трябва е на 115°C и при правилна позиция ще чуете щракване.

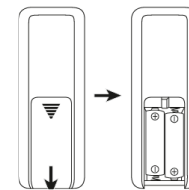

- Включете щепсела, прикрепен към пружината в съответствие с диаграмата.
- Сгънете възглавницата за седалка назад към облегалката за гръб.

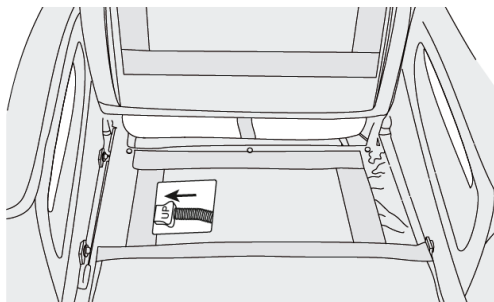

- Свържете долната част на възглавницата за гръб с долната част на възглавницата за седалка чрез ципа.
- Поставете двете възглавници върху масажния стол и ги прикрепете към него чрез кукичките. Свържете възглавницата за гръб към облегалката чрез ципа.
- Включете щепсела в контакта.
- Включете главния превключвател в долната част на стола.
- Включете масажния стол с бутона за включване/ изключване на ръчния превключвател.
- Масажният стол вече е готов за работа.

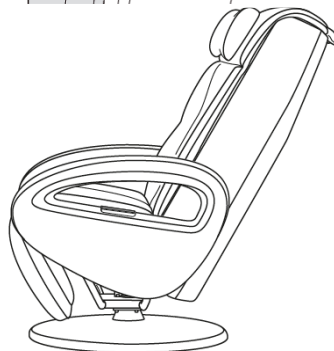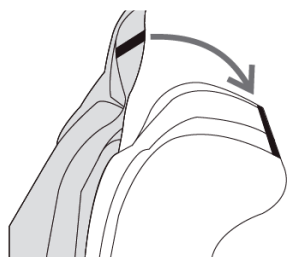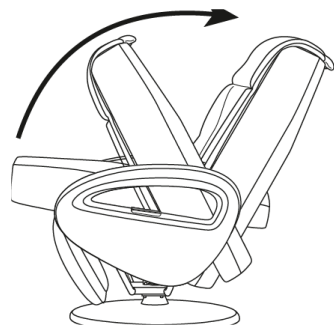

## 6. РАБОТА С УРЕДА

- Седнете върху стола внимателно, но само когато е в изправено положение – никога не сядайте върху масажния стол, когато е в хоризонтално положение.
- Ако почувствате кожни раздразнения спрете да използвате този масажор.
- Никога не махайте възглавницата за гръб по време на масаж.
- Носете удобни дрехи, когато сте върху масажния стол.
- Махнете предметите от джобовете си – мобилни телефони, джобни ножчета, ключове и тн.

- Имайте предвид, че масажът трябва да е приятен и отпускащ. Ако почувствате болка или неудобство трябва да смените позицията си върху стола или да прекратите масажа.
- Ако не сте използвали уреда продължително време се уверете, че функционира правилно преди да го използвате.
- Седнете в центъра на масажния стол, така че гръбначният ви стълб да се намира между масажните глави.
- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ. Когато масажорът е включен, облегалката за гръб се накланя, а облегалката за крака се вдига.
- След като целият ви гръб е сканиран, масажната програма Релакс се включва.
- Натиснете бутона за интензивност на вибрационен масаж, за да регулирате или изключите вибрационния масаж в зоните на седалището и краката ви.
- Вибрационният масаж може да се включи и изключи за отделните зони – за седалището и за краката.

- **Хоризонтална/изправена позиция:** Поставете масажния стол в хоризонтално положение.

- Облегалката за гръб и облегалката за крака могат да бъдат повдигнати или спуснати. Тези функции са налични, когато масажна програма е включена или изключена.


- Когато избраната масажна програма изтече, столът се изключва автоматично и остава в настоящата си позиция. Тази позиция може да се промени чрез бутоните за позициониране (т.4.4).

- Масажният стол се връща в изходна позиция, ако натиснете бутон за ВКЛ/ИЗКЛ два пъти.

- **Важно:** Не използвайте масажора за повече от 15 минути. След това го оставете да изстине за 30 минути преди да го използвате отново.

- Може да изключите масажора по всяко време чрез бутона за ВКЛ/ИЗКЛ. Масажният стол се връща в начална позиция.


- След като стола достигне начална позиция, трябва да го изключите чрез главния превключвател зад облегалката.

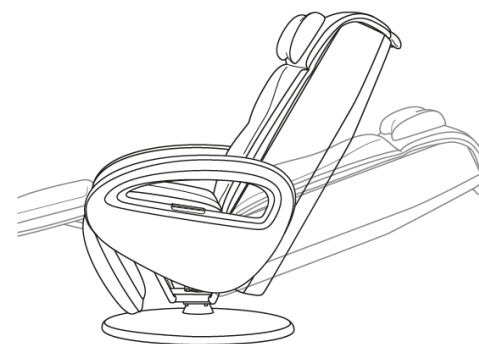

### 6.1 Допълнителни функции и настройки

- Масажният стол може да бъде сгънат, за да спестите място, когато го съхранявате.

- Изключете ръчния превключвател с бутона за ВКЛ/ИЗКЛ. Масажният стол се връща в начална позиция.
- Извадете щепсела на стола от контакта.
- Отворете възглавницата на седалката напред. Изключете щепсела, прикрепен към пружината.
- Освободете заключващия механизъм в задната долна част на облегалката.
- Внимателно натиснете облегалката надолу към седалката. Ако е необходимо, поставете възглавницата за облегалка назад върху облегалката преди да го направите.

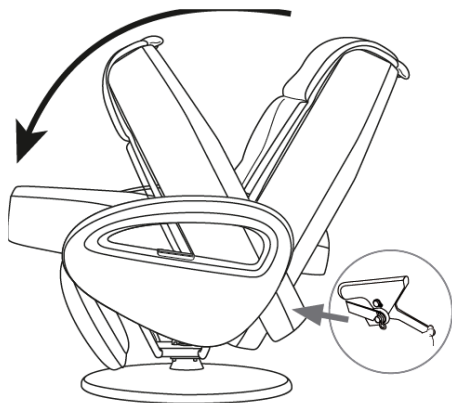

## 7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда от бутона и от контакта преди почистване и преди да го приберете за съхранение.
- Не допускайте влизането на вода или друг вид течност в уреда.
- Почиствайте леки замърсявания с леко навлажнена кърпа, която не остава влакна. Използвайте само препарати, които са специално за изкуствена кожа. След това подсушете стола със суха кърпа, която не оставя влакна.
- Този уред е направен от изкуствена кожа, която е чувствителна към омазняване. Заради това трябва да използвате само препарати, които са специално създадени за изкуствена кожа.
- В никакъв случай не допускайте вода да попада в масажния стол.
- Не използвайте разтворители и силни почистващи препарати върху масажния стол.

## 8. ВЪЗНИКВАНЕ НА ГРЕШКИ

Проблем	Причина	Решение
По време на употреба се чуват скърцащи звуци.	Това са звуците, които моторът издава по време на работа. Освен това масажните глави издават звук, когато	Не се изисква никакво решение.

	се движат под самият масажен стол.	
Облегалката за гръб или за крака не може да се вдигне/сними.	Облегалката е блокирана или тежестта върху нея е прекалено голяма.	Освободете облегалката.
Масажната функция спира по време на употреба.	Включена е защитата срещу прегряване	Изключете уреда и изчакайте 30 минути преди да се опитате да го включите отново.
	Максималният период на употреба е достигнат.	
Масажът не започва.	Уредът не е включен в ел. контакт.	Свържете уреда към контакт и го включете от бутона.
	Уредът не е включен от главният превключвател.	Включете уреда от главният превключвател.
	Предпазният изключвател е спрял захранването на стола.	Свържете се с оторизиран техник.

## 9. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Уредът отговаря на Директива 2002/96/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Повече информация за продукта ще намерите на

[www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).