

Ръководство на потребителя за фотоепилатор Beurer IPL 8800 Velvet Skin Pro



I. Включено в доставката:

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

- 1 x Beurer IPL Velvet Skin Pro
- 1 x приставка за прецизно обезкосмяване
- 1 x захранващ адаптер
- 1 x ръководство на потребителя
- 1 x торбичка за съхранение

II. Информация за уреда:

IPL 8800 Velvet Skin Pro е уред за трайно премахване на нежелано окосмяване по тялото при жени и мъже на основата на светлина – добре известен и доказан метод. Фотоепилацията се е доказала като безопасен и ефективен метод за постигане на трайно намаляване на окосмяването за 15 години клинично приложение по целия свят.

Уредът трябва да се използва само върху **крака, подмишници, бикини линия, гърди, корем и лице (само при жени)**. Устройството не е създадено за премахване на окосмяване в зоната на гениталиите, зърната на гърдите и ануса. Използвайте устройството само по описания в това ръководство начин.

Принцип на фотоепилацията

Фотоепилацията е базирана на принципа на селективната фототермолиза, който използва оптична енергия за дезактивиране на растежа на косъма. За да се постигне такъв термичен ефект, коренът на косъма трябва да поглъща избирателно светлинната енергия и да я преобразува в топлина. Тази селективност се постига, когато оптичната енергия, отделяна в тъканта, се абсорбира главно от пигмента меланин в косъма. Високоенергийната светлина се преобразува в топлинна енергия (топлина), която деактивира растежа на косата.

Всеки косъм по нашето тяло преминава през три фази на цикъл на растеж: анаген, катаген и телоген. Само космите, които са в анагенна фаза (фаза на растеж), реагират на третиране с IPL.



Анаген
(фаза на растеж)



Катаген
(преходна фаза)



Телоген
(фаза на почивка)

Въпреки че продължителността на цялостния цикъл на растеж на косъма е различен при всеки човек и зависи от областта на тялото, върху която расте косъма, той обикновено продължава от 18 до 24 месеца.

Необходим е поне един пълен цикъл на растеж на косъма, за да се постигне трайно обезкосмяване с помощта на Beurer Velvet Skin Pro.

Beurer Velvet Skin Pro защитава кожата Ви:

Епиляцията на основата на светлина не е подходяща за естествено тъмни тонове на кожата или за хора, които имат тен. Beurer Velvet Skin Pro разполага с вграден сензор за цвят на кожата, който измерва цвета на кожата ви в областта, която искате да третира. Тази функция за безопасност предотвратява третирането на кожа, която е прекалено тъмна или има прекалено голям тен. Отворът за светлина на устройството разполага с UV защита, която блокира вредната UV радиация.

Beurer Velvet Skin Pro защитава очите Ви:

С цел защита на зрението ви, това устройство има вграден сензор за контакт с кожата. По този начин никакви светлинни импулси не се излъчват, ако устройството се държи във въздуха. Само когато сензорът за контакт с кожата има допир с кожата ви, устройството ще излъчи светлинен импулс.

III. Инструкции за безопасност:

- Прочете тези инструкции за безопасност внимателно преди да използвате това устройство. В противен случай рискувате да се нараните или да претърпите материални щети. Запазете това ръководство за по-нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът е подходящ за лица над 18 години.
- Дръжте уреда и опаковката далеч от обсега на деца.
- Проверявайте уреда и кабела му преди всяка употреба. Ако откриете, че уредът и/или кабелът му са повредени не използвайте устройството.
- Уредът и адаптерът не трябва да се мокрят.
- Не използвайте уреда във влажни среди, например в близост до вани, мивки или други контейнери, които съдържат вода или течности – риск от токов удар!
- Пазете далече от очите. Не гледайте в източника на светлина.
- Не пъхайте предмети в уреда.
- Не блокирайте вентилационните отвори на уреда.
- Не пипайте вътрешните елементи на уреда в случай на повреда.
- Ако кабелът е повреден, той трябва да се смени. Ако не може да бъде сменен, уредът трябва да се изхвърли.
- Никога не оставяйте уреда в близост до деца без да ги наблюдавате.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки могат да се извършват само от оторизиран технически персонал. Ако отворите или се опитате да поправите уреда сами, неговата гаранция ще бъде анулирана.
- Не използвайте уреда по време на бременност и кърмене.
- Ако се появи силно зачервяване, образуване на мехури или изгаряния по кожата, спрете използването на уреда незабавно.
- Направете тест за чувствителност на всяка зона от тялото, която искате да третирате, 48 часа преди пълното третиране.
- Никога не поглеждате директно в лампата на устройството. Светлинната зона на устройството винаги трябва да има пълен контакт с кожата ви.
- Не излъчвайте светлинни импулси във въздуха.
- Въз основа на таблицата на шеста страница в това ръководство на потребителя определете кои интензитети на светлината са най-подходящи за цвета на вашата кожа и окосмяване, и дали този метод изобщо е подходящ за вас (ако не е, това е отбелязано с "x" в диаграмата).
- Не използвайте уреда върху кожа с естествено тъмен цвят. Третирането на тъмна кожа с устройството може да има неблагоприятни последици, като изгаряния, мехури или обезцветяване на кожата (хипер или хипопигментация).
- Уредът работи най-добре на тъмен тип косъм (с високо съдържание на меланин). Черното и тъмнокафявото окосмяване показват най-добра реакция и, въпреки че кафявото и светлокафявото окосмяване също ще реагират на третирането, те обикновено изискват повече сесии за епиляция. Червеното окосмяване може да предизвика реакция. Бялото, сивото и русото окосмяване обикновено не реагират на уреда, въпреки че някои потребители забелязват резултати след многократна употреба на устройството.

- Устройството може да предизвика временно пигментиране на кожата.
- Никога не се опитвайте да поправяте и да отваряте устройството сами. В противен случай гаранцията на устройството ще бъде анулирана. Ако отворите устройството рискувате да влезете в контакт с опасните електрически компоненти на устройството или със светлинната енергия. Това може да доведе до сериозни наранявания и/или до перманентно увреждане на зрението ви.
- Дръжте устройството и адаптера далеч от вода. Никога не го мокрете и не допускайте вода или друга течност да попадне в корпуса му – риск от електрически шок.
- Не питайте устройството и кабела му с мокри ръце.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане.
- Съблюдавайте + и – поляритета на батериите.
- Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа. Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и потърсете лекар.
- Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете батериите.
- Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън.
- Не разглобявайте или мачкайте батериите.
- Преди първоначална употреба трябва да заредите батерията изцяло.
- За да поддържате доброто състояние на батерията трябва да я зареждате напълно поне 2 пъти в годината.
- Не излагайте уреда на температури под 10°C или над 40°C по време на употреба.
- Устройството не бива да бъде оставяно без надзор, ако е включено в ел. контакт.
- Уредът трябва да се използва само по предназначение и според инструкциите за употреба на производителя. Производителят не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба.
- Не използвайте устройството, ако кабелът или захранващият му адаптер са повредени. Пазете кабела от горещи повърхности.
- Вадете кабела от ел. контакт преди да почиствате устройството.
- Вадете кабела от ел. контакт след като сте заредили устройството.
- Не използвайте устройството с приставки или аксесоари, които не са препоръчани от производителя на фотоепилатора.
- Не използвайте уреда, ако видите или усетите дим при употреба.
- Не използвайте уреда, ако сензорът за цвят на кожата или светлинната зона са напукани или счупени.
- Не използвайте уреда, ако корпусът му е напукан или се разпада.
- Не използвайте уреда, ако светлинната зона е напукана, счупена или липсва.
- Зареждайте устройството само с предоставения в този комплект захранващ адаптер.
- Не използвайте устройството, ако UV филтърът на прозореца за излъчване на светлина е повреден.
- Не използвайте приставката за прецизно обезкосмяване, ако филтърът е повреден.
- **Не използвайте уреда:**
 - Ако страдате от рак на кожата (или сте имали такъв в миналото).
 - Ако сте имали потенциални злокачествени заболявания на кожните участъци, които трябва да се третират.
 - Ако страдате от епилепсия с чувствителност към мигаща светлина.
 - Ако имате келоидни белези.
 - Ако страдате от херпес или псориазис в зоната за третиране.
 - Ако страдате от някаква форма на светлочувствителност, като порфирия, полиморфна фотодерматоза, слънчева уртикария, лупус и др.
 - Ако страдате от метаболитно разстройство като диабет.
 - Ако страдате от нарушение в кръвосъсирването.
- **Не използвайте уреда, ако взимате някое от следните лекарства:**
 - Ако приемате медикаменти, които правят кожата по-чувствителна към светлина, включително нестероидни противовъзпалителни средства (напр. аспирин, ибупрофен, парацетамол), тетрациклини, фенотиазини, тиазидни диуретици, сулфонилурея, сулфонамид, DTIC,

флуорурацил, винбластин, гризеофулин, алфа-хидроксидни киселини, бета-хидроксидни киселини, Retin-A®, Accutane® и/или локални ретиноиди.



- Ако се лекувате или наскоро сте били подложени на лечение с азелаинова киселина.
- Ако сте били лекувани с Accutane® в последните 6 месеца.
- Ако сте били на стероиди през последните три месеца.
- Ако през последните шест до осем седмици сте имали процедура по екسفолация на кожата или друга процедура за изглаждане на кожата.
- Ако сте били подложени на лъчева терапия или химиотерапия през последните три месеца.
- **Не използвайте уреда върху следните зони:**
 - Върху лигавиците в областта на носа или гърлото.
 - Върху или в близост до активен имплант, като пейсмейкър или устройство за инконтиненция, инсулинова помпа и др.
 - Върху лицето над скулите, около очите, веждите или миглите, тъй като това може да доведе до сериозно увреждане на очите.
 - Върху зърната и ареолите на гърдите и гениталиите и ануса (и при мъже и при жени).
 - Върху пиърсинги или други метални предмети, като обеци или бижута.
 - Върху татуировки или перманентен грим.
 - Върху тъмнокафяви или черни петна, като големи лунички, родилни петна, бенки или брадавици.
 - При екзема, псориазис, лезии, открити рани или остри инфекции. Изчакайте докато засегнатата зона заздравее преди да използвате уреда.
 - Върху увредена или напукана кожа или в области, застрашени от злокачествено заболяване.
 - Върху области на тялото си, където може да искате да имате окосмяване в бъдеще.
- **Внимавайте с излагането на слънце преди и след третиране!**
- **Слънчеви бани преди третиране:**
 - Преди да използвате уреда, изчакайте поне две седмици след като сте се излагали на слънчева баня.
 - Преди да използвате уреда, проверете кожата си за следи от слънчево изгаряне. Изчакайте пълното му излекуване.
 - Направете тест за чувствителност върху кожа с тен, за да определите правилното ниво на мощност.
- **Слънчеви бани след третиране:**
 - След третиране, изчакайте поне 48 часа преди слънчева баня. Зачервената кожа трябва да се пази от слънце.
 - През първите две седмици след третиране, кожата трябва да е покрита с дрехи или да се използва минимум 30-ти защитен фактор против слънце.
- **Не използвайте уреда 24 часа преди или след посещения на сауна или басейн, защото хлорът може да предизвика раздразнение на кожата.**
- **Солариум:**
 - Горните инструкции важат също и при потъмняване чрез използване на солариум и лосиони за тен.
- **Внимание:** Този списък не е изчерпателен. Ако приемате лекарства, отпускани по лекарско предписание, редовно се следите поради заболяване и/или не сте сигурни, че уредът е безопасен за употреба от вас, консултирайте се с вашия лекар или дерматолог преди да използвате уреда.

IV. Описание на устройството:

1. Мигаща светлина
2. Светлинна зона
3. Спусък (режимът „Автоматичен светлинен импулс“ се прилага след като 3 импулса са били задействани един след друг)
4. Дисплей на нивото на енергия
5. Дисплей на нивото на батерията
6. Бутони за избор на нивото на енергия
7. Бутон за автоматичен избор на цвета на кожата
8. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
9. Индикаторна лампа



10. Сензор за цвят на кожата/сензор за контакт с кожата
11. Гнездо за захранване на устройството
12. Приставка за прецизно обезкосмяване

1. **Бутон за ВКЛ./ ИЗКЛ.** – Устройството се включва и изключва като натиснете бутона . Устройството се изключва автоматично, ако не се използва в продължение на пет минути. Когато устройството е включено, всички индикатори на дисплея за нивото на енергия ще светнат за кратко, след което устройството преминава на енергийно ниво 1.
2. **Бутон за автоматичен избор на цвета на кожата** – Чрез натискането на този бутон  може да установите препоръчаното за вас ниво на енергия за дадената зона, която искате да третирате. Когато натиснете този бутон всички бутони за избор на нивото на енергия ще започнат да мигат за 10 секунди. Ако сензорът за контакт с кожата е в пълен контакт с кожата и устройството произведе светлинен импулс, препоръчаното енергийно ниво (според цвета на кожата в зоната, която искате да третирате) се задава автоматично. Съответното ниво на енергия светва. Трябва да имате предвид, че препоръчителното енергийно ниво се избира само, ако съответният бутон се натисне, не само ако цвета на кожата се промени или зоната на третиране се промени.
3. **Бутони за избор на нивото на енергия** – бутонът + (по-високо ниво на енергия) и бутонът – (по-ниско ниво на енергия) ви позволяват да изберете между 6 различни нива. Изберете нивото според личното ви физическо предпочитание и комфорт или на базата на теста за чувствителност на кожата ви. Може да използвате бутона за автоматичен избор на цвета на кожата, за да изберете оптималното ниво на енергия за всяка зона на третиране.
 - Чрез натискането на бутоните + и – (след като сте включили устройството) нивото на енергия ще бъде намалено или увеличено с едно ниво. Всяко допълнително натискане променя нивото на енергия между най-ниското (маркирано с „1“) и най-високото (маркирано с „6“).
 - Съответният брой на зелени индикатори ще светне на дисплея за ниво на енергията според избраното ниво на енергия.
4. **Индикатор за статуса на батерията** – този дисплей ви дава информация за статуса на батерията:
 - Червен: батерията се зарежда.
Бележка: Ако светлината за енергийно ниво 1 свети (както и червената светлина), устройството е включено.
 - Зелен: Батерията е напълно заредена и устройството е свързано към външен източник на захранване.
 - Червен, мига бавно: Слаба батерия, около 30 процента заряд.
 - Червен, мига бързо: Много слаба батерия, около 10 процента заряд.
Бележка: Дисплеят за нивото на батерията свети в зелено или мига в червено само при включено устройство.
5. **Индикаторна лампа** – този дисплей в задната част на устройството има няколко светлини за състоянието на устройството:

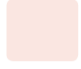
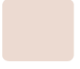






| Дисплей | Режим | |
|------------------|---|---|
| Свети в зелено | Работи | Устройството е готово за светлинен импулс. Няма осветени светлинни индикатори по време на светлинен импулс или между светлинни импулси. |
| Свети в оранжево | Спусъкът (за светлинен импулс) е блокиран. | Няма достатъчен контакт с кожата и устройството няма да издаде светлинен импулс. |
| Свети в червено | Спусъкът (за светлинен импулс) е блокиран. | Устройството няма да издаде светлинен импулс, тъй като цвета на кожата е в недопустимия цветови диапазон. |
| Мига в оранжево | Показва, че устройството е в края на експлоатационния си живот. | Показва, че устройството е в края на експлоатационния си живот. |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Свети в червено | Достигнат е края на експлоатационния живот на устройството. | Устройството е блокирано перманентно, светлинните импулси са достигнали лимита си, възникнала е вътрешна грешка или прозореца за третиране е поставен неправилно на устройството. |
|-----------------|---|---|

V. Подготовка за употреба:

Стъпка 1: Проверете, че устройството е подходящо за вашия цвят кожа и окосмяване:

Преди първоначална употреба трябва да се уверите, че цвета на кожата и окосмяването ви са подходящи за употреба на устройството. Направете това чрез таблицата, която може да намерите по-долу (неподходящият цвят окосмяване и кожа са маркирани с „X“). Освен това трябва да проверите, кое ниво на употреба е подходящо за вас.

| | | Цвят на кожата | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| | |  |  |  |  |  |  |
| Цвят на окосмяване |  | X | X | X | X | X | X |
| |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |

Стъпка 2: Направете си тест за кожна чувствителност:

Този тест ще ви помогне да установите как кожата ви ще реагира на третиране с това устройство. Освен това ви помага да зададете оптималното ниво на енергия за всяка зона на третиране. Правете тест за чувствителност на всяка зона, която ще третирате 48 часа преди самата процедура.

Бележка: При третиране на лицето, тестът трябва да се извърши върху зона без косми – напр. под ухото или отстрани на врата.

Преди употреба трябва да направите следното:

1. Обръснете зоните, които искате да третирате.
2. Уверете се, че зоните за третиране са избръснати, чисти и сухи – без приложени пудра, крем, грим или дезодорант.

Внимание: Не почиствайте кожата със запалими течности като алкохол или ацетон скоро преди използване на уреда.

3. Подгответе устройството за употреба.
4. Поставете светлинната зона върху кожата си и се уверете, че има пълен контакт с кожата ви.
5. Устройството автоматично започва работа на най-ниското ниво на енергия. Натиснете спусъка, за да предизвикате светлинен импулс. Ще видите ярка светлина и ще чуете пукащ звук. Може да усетите леко парене и/или затопляне. В рамките на макс. 3 секунди, устройството ще бъде готово за следващия импулс и индикаторната лампа на уреда ще свети в зелено постоянно.
6. Премахнете светлинния прозорец от кожата си и го поставете върху следващата тест зона.

Бележка: Увеличете нивото на енергия само, ако предишното ниво не е било неприятно/некомфортно за вас.

Бележка: Може да използвате бутона за автоматичен избор на цвета на кожата, за да установите препоръчаното ниво на енергия за дадената зона на третиране. Може да увеличите нивото на енергия по всяко време.

7. Може да увеличите енергията с една степен като натиснете бутон „+“. Пуснете следващия импулс с енергийно ниво 2 като натиснете спусъка.
8. Повторете стъпки 6 и 7 докато не достигнете макс. ниво от 6, само ако се чувствате добре. Спрете теста, ако се чувствате некомфортно, тъй като съществуват неблагоприятни рискове като подуване, зачервяване и появяване на мехури, ако енергийното ниво се увеличи прекалено.

9. Изчакайте 48 часа и прегледайте внимателно зоната в която сте направили теста за чувствителност. Ако кожата изглежда нормално (или има само леко зачервяване) може да преминете към пълна процедура на най-високото енергийно ниво (което сте използвали при теста и ви е било комфортно). Ако забележите голямо зачервяване, подуване или поява на мехури (при употреба на устройството на най-ниското енергийно ниво) недейте да използвате устройството за пълна процедура в тази зона.

Бележка: Недейте да използвате енергийно ниво, което не сте тествали за пълна процедура в дадена зона.

Бележка: Недейте да правите пълна процедура в тестовата зона поне 1 седмица след като сте направили теста.

Автоматично определяне на цвета на кожа:

Тази функция ви позволява да установите подходящото ниво на енергия за вашата кожа.

Бележка: За ваша безопасност ви препоръчваме да използвате най-тъмната част от кожата си (външната част на крака, задната част на ръката).

Важно: Преди да използвате устройството на друга част на тялото си трябва да направите тест и на нея.

- Когато устройството работи в режим за определяне на цвета на кожата, уредът няма да издава светлинни импулси.
- Ако искате да прекратите процеса на определяне на цвета на кожата натиснете един от бутоните за избор на енергийно ниво (+ или -).

Стъпка 3: Планирайте процедурите за обезкосмяване за най-добри резултати

Типичният цикъл на растеж на косъма е 18-24 месеца. По време на този цикъл може да са необходими няколко процедури по обезкосмяване за оптимални резултати. Ефективността на уреда зависи от дадения човек, техния цвят на кожа, цвят на окосмяване, дадената зона на третиране и начина на употреба на устройството.

Типичен план за обезкосмяване:

- Първите 3 до 4 сесии трябва да бъдат направени през около 2 седмици една от друга.
- Петата до седмата сесия трябва да бъдат направени през около 4 седмици една от друга. След това може да използвате уреда, когато прецените до постигане на перманентни резултати.
- Този план ви помага за постигане на оптимални резултати, но може да създадете свой собствен план според личните си предпочитания.

Бележка: Постигнатите резултати **не** може да бъдат подобрени, дори ако третирате дадената зона повече от веднъж на две седмици.

Стъпка 4: Запознайте се с възможните странични ефекти:

Ако следвате инструкциите за употреба в това ръководство ще минимизирате възможността за поява на странични ефекти при употреба на устройството. Независимо от това са възможни следните странични ефекти:


- При няколко импулса върху една и съща зона на кожата:
 - Леко раздразнение на кожата; леко зачервяване на кожата; повишена чувствителност на кожата: **много рядък страничен ефект.**
 - Лезии и изгаряне на кожата; белези; промени в пигментацията: **рядък страничен ефект.**
 - Голямо зачервяване и подуване на кожата; инфекция, хематома: **изключително рядък страничен ефект.**

VI. Работа с уреда:

1. Включете захранващия адаптер към уреда и към електрическата мрежа. Заредете устройството напълно (приблиз. 2 часа).
2. Уверете се, че зоните за третиране са избърснати, чисти и сухи – без приложени пудра, крем, грим или дезодорант.
3. Оставете устройството да изстине, ако ви се струва прекалено топло.

Внимание: Не почиствайте кожата със запалими течности като алкохол или ацетон скоро преди използване на уреда.

4. Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ.

5. Изберете подходящото ниво на енергия за вашия цвят кожа чрез бутоните + или - или използвайте бутона  за автоматичен избор на цвета на кожата.

6. Поставете устройството под ъгъл 90 градуса към кожата си, така че да има пълен контакт с кожата ви.
7. Индикаторната лампа в задната част на уреда светва в зелено, за да покаже, че може да продължите с процедурата по обезкосмяване.
8. Натиснете спусъка, за да предизвикате светлинен импулс.
9. Устройството разполага с автоматичен режим на работа. Той се активира, ако натиснете спусъка за 3 последователни светлинни импулса. След това устройството издава светлинни импулси без да се налага да натискате спусъка повторно (стига да има достатъчно контакт с кожата ви).

Забележка: Не третирайте една и съща зона два пъти в рамките на една процедура. Рискът от странични ефекти се повишава при повторно третиране на кожата.

Забележка: Импулсите от уреда трябва да се прилагат на редове, започвайки от единия край на всеки ред и продължавайки до другия край. Тази техника позволява по-добро следене на вече обработените области на кожата и ви помага да избегнете третирането на една и съща зона повече от веднъж, както и третирането на припокриващи се участъци на кожата. Светлината на уреда е проектирана по такъв начин, че да остави временна следа върху третираната зона на кожата. Тези видими отпечатъци могат да се използват за прецизно поставяне на следващия импулс.

10. Повдигнете устройството от кожата си и го поставете върху следващата зона, която искате да третирате. Уверете се, че не пропускате някои части на кожата си и че не застъпвате вече третирани зони. Устройството ще се презареди веднага и ще бъде готово за следващия импулс в рамките на 3 секунди (на най-високото ниво на интензивност) (индикаторната лампа на устройството отново свети в зелено постоянно). Повторете процедурата, докато не третирате цялата зона, която желаете.
11. Когато сте приключили, натиснете бутона за Вкл./Изкл., за да изключите устройството.
12. Препоръчваме ви да почиствате светлинната зона на уреда след всяка употреба.
13. При съхранение ви препоръчваме да прибирате устройството в оригиналната му кутия, на място далеч от вода и влажност.

Специални инструкции за третиране на лице:

- Мъже не трябва да използват уреда върху лицето, врата и брадичката си.
- Не използвайте уреда върху лицето при мощност по-висока от ниво 3.
- Не използвайте уреда върху лицето (при жени; мъжете не бива да използват уреда върху лицето си) в областта над скулите или върху очите, веждите и миглите, тъй като това може да доведе до сериозно увреждане на очите. Не използвайте уреда върху лигавиците в областта на носа или гърлото.
- Не използвайте уреда в зоната на носа и врата си.
- Кожата на лицето е много чувствителна и изисква специални грижи. Спазвайте всички инструкции за безопасност в това ръководство на потребителя, за да предотвратите неблагоприятни последици. Препоръчваме ви първо да извършите третиране на тялото си и да се запознаете с работата на уреда, преди да извършите третиране на лицето. Уредът може да се използва за третиране на всички области на лицето в зоната под скулите, като горна устна, бузи, челюст, брадичка и шия.

Бележки:

Използвайте приставката за прецизно обезкосмяване, когато третирате лицето си. По този начин може да насочите светлинните импулси по най-точния и прецизен начин.

- Прецизната приставка може да се постави върху главата на устройството като я поставите върху светлинната зона и я натиснете.
- Позиционирайте прецизната приставка, така че да се подравни със сензора за цвят/контакт с кожата.
- Ако сензорът е покрит няма да може да пуснете светлинен импулс.
- Използвайте прецизната приставка с макс. енергийно ниво 3 и го използвайте само, ако цвета на кожата ви е по-светъл от тип 5.
- Не използвайте прецизната приставка за повече от 80 последователни импулса. Червеният филтър може да се нагорещи и да ви изгори.

Бележка: Окосмяването на лицето може да е резултат от хормони, така че е възможно да са необходими повече сесии за постигане на положителни резултати.

Грижа след третиране на лицето:

- Приложете успокояващ лосион, напр. алое вера.
- Не използвайте екфолианти, избелващи лосиони или подобни продукти поне 24 часа след третирането, за да не раздразните кожата си.
- Поне 48 часа след третирането избягвайте директно излагане на слънце за повече от 15 минути. Използвайте слънцезащитен крем с фактор 30 или по-висок.
- Не махайте косми от третираните участъци с кола маска или пинсета.

VII. Почистване:

- Почиствайте уреда след всяко приложение като обърнете особено внимание на светлинната зона.
- Никога не поставяйте уреда или части от него във вода или други течности и не го мокрете!
- Изключете уреда от контакта преди да го почистите.
- Почистете корпуса на уреда със суха и чиста кърпа и със специален препарат за почистване на ел. уреди.

VIII. Често задавани въпроси:

Технологията наистина ли работи?

Да. Чрез клинични медицински тестове е доказано, че технологията Velvet Skin Pro може да се използва за постигане на дълготрайни резултати на обезкосмяване. Резултатите обаче могат да варират в зависимост от цикъла на растеж на косъма, използваната мощност и дебелината и цвета на космите.

Колко време продължава една сесия с уреда?

Времето варира в зависимост от зоната на приложение. Цялостно третиране на тялото (крака, ръце, подмишници, бикини зона и лице под скулите) отнема приблизително 21 минути при най-ниско ниво на интензивност и използвайки голямата приставка.

Безопасен ли е уредът?

Уредът е разработен със силен акцент върху вашата безопасност и използва клинично тествана технология. Задължително спазвайте инструкциите за употреба и безопасност.

Има ли болка при използването на уреда?

При правилна употреба повечето потребители на уреда отчитат леко топло усещане при издаване на светлинния импулс. Потребителите с по-гъсто и по-тъмно окосмяване могат да изпитат малко по-голям дискомфорт, но той отшумява след като сесията за премахване на космите приключи. Уредът има 6 настройки на мощността, които можете да изберете в зависимост от чувствителността на вашата кожа.

Уредът ефективен ли е върху бяла, сива или руса коса?

Уредът е най-ефективен при тъмно окосмяване или върху окосмяване с високо съдържание на меланин. Меланинът е пигментът, който придава цвят на косата и кожата и поглъща светлинната енергия. Черното и тъмнокафявото окосмяване показват най-добра реакция. Кафявото и светлокафявото окосмяване също реагират на третирането, но обикновено са необходими повече сесии за епилация. При червеното окосмяване може да видите ограничен ефект. Бялото, сивото или русото окосмяване обикновено не реагират на уреда, въпреки че някои потребители забелязват резултати след множество сесии на епилация.

Уредът може ли да се използва върху кафява или черна кожа?

Уредът не е ефективен при естествено тъмна кожа. Работата му се основава на светлина, която премахва нежеланото окосмяване чрез селективно третиране на пигмента на космите. Различно количество пигмент присъства в тъканта на кожата. Количеството пигмент в кожата на всеки човек определя степента на риск, на която той е изложен при използване на уреда. Третирането на тъмна кожа със светлинни процедури за премахване на окосмяване може да има неблагоприятни последици, като изгаряния, образуване на мехури или промяна в цвета на кожата (хипер или хипопигментация). Уредът има вграден сензор за цвят на кожата, който измерва цвета ѝ преди всяка светкавица. Сензорът не позволява на уреда да издава импулси, ако открие по-тъмни тонове на кожата.

Кога мога да очаквам видими резултати?

Както при всички други фото- и лазерни епилатори, резултатите не могат да се видят веднага и дори може да мислите, че нищо не се е случило. След сесия за фотоепилация може да изглежда, че космите израстват отново, но обикновено повечето от тях ще изпаднат след две седмици. Освен

това космите растат на три различни етапа и уредът има ефект само върху космите във фазата на активен растеж. Това е една от основните причини, поради които са необходими няколко сесии за постигане на траен резултат.

Вярно ли е, че някои косми растат по-тънки и меки след третиране?

Това явление е документирано и коментирано от козметици и лекари, които използват фото- и лазерни епилатори. Възможно е някои косми да пораснат отново по-тънки и фини след епилация с уреда. Обикновено тези косми са само малка част от първоначалните и последващо третиране може да има желаните ефект върху тях.

IX. Регулаторна информация:



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Използвайте само на закрито.



Не използвайте това устройство в близост до вода – мивки, вани, басейни и т.н.



Пазете от влага.



Внимание: Оптична радиация.



Внимание: Дръжте далеч от очите си.



Не използвайте върху кожа с тен или след излагане на слънце.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Pb = Батерията съдържа олово / Cd = Батерията съдържа кадмий / Hg = Батерията съдържа живак

X. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Weiger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.