

Ръководство на потребителя за дълбокотъканен масажор Beurer MG 180



I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. дълбокотъканен масажор Beurer MG 180
- 6 бр. приставки
- 1 бр. захранващ адаптер
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба. Ако предадете устройството на друг човек, моля, предоставете му и това ръководство за употреба.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Уредът е предназначен за дълбокотъканно масажире на човешкото тяло и следва да се използва единствено за домашна употреба. Не е подходящ за медицински или търговски цели. Устройството трябва да се използва само по предназначение и съгласно указанията в това ръководство за употреба, като се използват единствено принадлежностите, включени в доставката. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна или некоректна употреба. Не използвайте устройството, ако едно или повече от изброените предупреждения и бележки за безопасност се отнасят за вас. Ако не сте сигурни дали устройството е подходящо за вас, моля, консултирайте се с вашия лекар.

Противопоказания:

- Не използвайте устройството, ако страдате от медицинска аномалия или имате някакво нараняване в зоната, която ще масажирате (например дискова херния или отворени рани).
- Не използвайте устройството, ако имате имплантиран пейсмейкър.
- Не използвайте уреда за масаж в областта на сърцето.
- Не използвайте масажната функция на уреда върху подута, изгорена, възпалена или наранена кожа и части от тялото.
- Не използвайте уреда върху порезни рани, капиляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания.
- Не използвайте уреда по време на бременност.
- Не използвайте устройството върху главата или лицето (например върху очите).
- Не използвайте уреда върху ларинкса, в областта на слабините или други особено чувствителни части на тялото.
- Не използвайте устройството върху гръбначния стълб или при зони, където костта се намира непосредствено под кожата.
- Не използвайте устройството, докато спите.
- Не използвайте устройството върху животни, включително домашни любимци.
- Не използвайте устройството след прием на лекарства или алкохол (намалена когнитивна способност!).
- Не използвайте устройството, докато се намирате в превозно средство.
- Преди да използвате уреда, следва да се консултирате с вашия лекар, особено в следните случаи:
 - ако страдате от тежко заболяване,
 - ако страдате от тромбоза,
 - ако страдате от диабет,
 - ако изпитвате болка с неясен произход.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Основни предупреждения:

- Внимание – опасност от задушаване! Дръжте опаковъчните материали и приставките далеч от деца.
- Внимание – опасност от токов удар! Не допускайте контакт на устройството с вода или други течности и никога не докосвайте устройство, което е паднало във вода.

- Уредът не е играчка — не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит или знания, при условие че са под наблюдение, инструктирани са как да използват устройството безопасно и са напълно наясно с рисковете, свързани с неговото използване.
- Децата не трябва да използват устройството без родителски контрол.
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Може да възникне риск от пожар, ако устройството се използва неправилно или ако инструкциите в това ръководство не се спазват.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи, особено ако наблизо има деца.
- Никога не използвайте устройството под покривало, като одеяло, възглавница и други.
- Никога не използвайте устройството в близост до бензин или други силно запалими вещества.
- Работете с устройството само в сухи и закрити помещения.
- Никога не използвайте уреда във ваната или в сауна.

Общи предпазни мерки:

- Преди употреба се уверете, че устройството и неговите приставки нямат видими повреди. При съмнение не използвайте уреда, а се свържете с вашия търговец или с оторизиран сервизен център.
- При никакви обстоятелства не отваряйте корпуса на уреда.
- Дръжте уреда далеч от остри или заострени предмети.
- Ако устройството е изпускано или е претърпяло други повреди, то не трябва да се използва повече.
- Изключвайте уреда след всяка употреба и преди почистване.
- Никога не използвайте уреда повече от 15 минути (поради риск от прегряване). Оставете устройството да се охлади поне 15 минути, преди да го използвате отново.
- Използвайте устройството само с предоставените към него аксесоари.
- Пазете устройството и неговите приставки от удари, прах, химикали, рязка смяна на температурата, електромагнитни полета и близки източници на топлина (фурни, отоплителни уреди).
- Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде изхвърлен. Ако кабелът не може да бъде отстранен, трябва да се изхвърли цялото устройство.
- Не поставяйте предмети в отворите на устройството или в неговите движещи се части. Уверете се, че всички движещи елементи могат да се движат свободно по всяко време.
- Не притискайте която и да било част от тялото си, особено пръстите си, между подвижните масажиращи елементи или техните държачи в устройството.
- Уредът не е предназначен за използване в търговски помещения.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Никога не хвърляйте устройството или батериите в огън.
- Пазете батериите от пряка слънчева светлина, високи температури и вода.
- Излагането на батериите на твърде високи температури или ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности и газове.
- Никога не правете късо съединение между батериите или връзките на устройството, захранвано с батерии.
- Никога не изтощавайте принудително, загрявайте, разглобявайте, отваряйте, мачкайте, деформирайте, запечатвайте, променяйте или удряйте устройството или батериите.
- Ако батериите/зарядните кабели/зарядните устройства са дефектни, спрете да ги използвате и ги изхвърлете според указанията възможно най-скоро.
- Винаги използвайте подходящ или предоставен кабел за зареждане/зарядно устройство/захранващ адаптер.
- Избягвайте непрекъснатото зареждане или презареждане на устройството. Изключвайте зарядното устройство, след като приключите със зареждането.
- За зареждане на устройството, моля, използвайте адаптер, който отговаря на входните спецификации на устройството (вход: 26.0 V, 1.0 A).
- Зареждайте устройството само под наблюдение и внимавайте за евентуално загряване, деформация или изтичане на газове. Ако имате съмнения, прекратете зареждането.
- **Риск от експлозия! Риск от пожар!** Неспазването на горепосочените указания може да доведе до нараняване, прегряване, протичане, изпускане на газове, счупване, експлозия или пожар.

Внимание: Устройството съдържа батерия, която не може да бъде заменена. След като батерията достигне края на своя експлоатационен живот, устройството трябва да бъде изхвърлено според указанията.


IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Приставка
Предоставени са 6 различни видаове приставки.
2. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
3. Индикатор за нивото на батерията (5 светодиода)
1 червен + 4 зелени светодиода = Състояние на батерията при 100%
1 червен + 3 зелени светодиода = Състояние на батерията при 75%
1 червен + 2 зелени светодиода = Състояние на батерията при 50%
1 червен + 1 зелен светодиод = Състояние на батерията при 25%
1 червен светодиод мига = Нисък заряд на батерията
4. Превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.
5. Порт за захранващ адаптер
6. Дръжка
7. LED дисплей

Приставки:



8. Голяма сферична глава:
Най-подходяща за третиране на големи зони и големи мускулни групи.
9. Малка сферична глава:
Най-подходяща за третиране на малки зони мускули и мускулни групи.
10. Спираловидна глава:
Най-подходяща за третиране на дълбока мускулна тъкан и за целенасочени точкови масажи.
11. U-образна глава:
Най-подходяща за третиране на дълбока мускулна тъкан в областта на долната част на гърба (без гръбначния стълб) или ахилесовото сухожилие.
12. Глава с въздушна възглавничка:
Най-подходяща за третиране на чувствителни тъкани, като например в областта на врата.
13. Плоска глава:
Най-подходяща за третиране на големи участъци по цялото тяло.

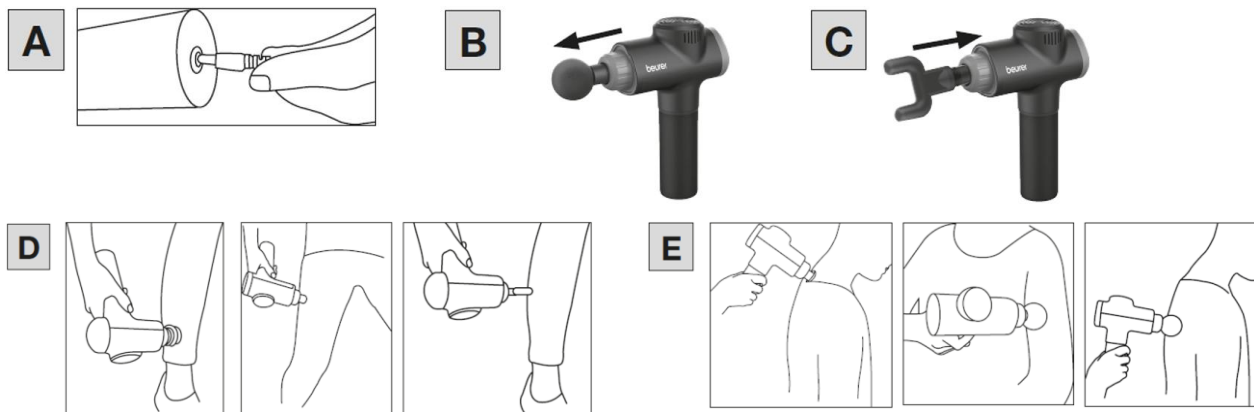

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба:

Преди да използвате дълбокотъканния масажор за първи път, заредете го минимум 3,5 часа. За да направите това, продължете както следва:

1. Свържете предоставения захранващ адаптер към масажора. Портът за захранващ адаптер се намира на дъното на дръжката на масажора. **A**
2. След това включете захранващия адаптер в подходящ контакт.

Докато устройството се зарежда, всички 5 светодиода мигат от дясно наляво. След като масажорът е напълно зареден, всички 5 светодиода ще светят постоянно. Батерията издържа около 3 часа работа при пълно зареждане. Заредете масажора отново, когато започне да мига само един червен светодиод по време на работа.

Внимание: Масажът трябва да бъде винаги приятен. Възможна е поява на леки хематоми, което е положителен ефект от масажа, тъй като използването на устройството може да стимулира кръвообращението ви. В изолирани случаи може да се появят области на зачервяване по кожата. Ако почувствате прекомерно дразнене на кожата, прекратете употребата на устройството и се консултирайте с лекар. В зависимост от степента на мускулното напрежение, се препоръчва продължителност на приложението от около 10-15 минути за желаната зона (крака, рамене, ръце и гръб).

Избиране/сменяне на приставката:

Преди да започнете масажа, първо трябва да изберете подходящата приставка. Разделът „Приставки“ съдържа списък на всички приставки, както и за какво са най-подходящи те.

За да смените приставка, изпълнете следните стъпки:

1. Издърпайте съществуващата приставка хоризонтално от масажора. **[B]**
2. Поставете желаната приставка плътно в масажора, докато не усетите, че е щракнала на място. **[C]**

Включване на устройството/избиране на нивото на вибрация:

Внимание: Масажорът разполага с автоматична функция за изключване. Това означава, че масажорът се изключва автоматично след период на работа от 15 минути.

1. Плъзнете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. от долната страна на дръжката в положение „ON“. Индикаторът за нивото на заряда на батерията ще започне да свети.
2. Натиснете за кратко бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите устройството.
3. За да превключвате между четирите настройки на вибрацията, натиснете за кратко бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. Ако устройството е на четвъртата степен на вибрация и натиснете отново бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., масажорът ще се изключи. . Можете също така да изключите устройството по всяко време по време на работа, като натиснете и задържите бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. за 2 секунди. Индикаторът за състоянието на батерията изгасва и масажът спира.
4. След като масажът приключи, плъзнете превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. на дъното на дръжката в позиция „OFF“.

Примери за употреба

Долни крака, бедра и прасци **[D]**

Рамена, ръце и гръб **[E]**

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Винаги изключвайте уреда преди почистване.
- Почиствайте устройството само с леко влажна кърпа.
- Почиствайте устройството само чрез посочените методи. При никакви обстоятелства не допускайте да попадне течност в устройството.
- Не използвайте устройството отново, докато не е напълно сухо.
- Не почиствайте устройството в съдомиялна машина.
- Не използвайте абразивни почистващи средства или твърди четки.

Поддръжка:

Ако не планирате да използвате устройството за дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка на сухо място, като се уверите, че върху него не са поставени допълнителни предмети.

Ремонти:

- Никога не се опитвайте да ремонтирате устройството сами!
- Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

Проблем	Решение
Устройството спира по време на употреба.	Уверете се, че не оказвате прекалено голям натиск върху устройството, когато го използвате. Ако упражните твърде силен натиск, устройството ще спре за кратко.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Изхвърляне на батерията:

Дефектни или изразходвани батерии трябва да се рециклират в съответствие с Директива 2006/66/ЕО и нейните изменения. Празните и напълно изтощени батерии трябва да се изхвърлят в специално предназначени кутии за събиране в пунктове за рециклиране или търговци на електроника. Вие сте задължени по закон да изхвърлите батериите.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = батерията съдържа олово

Cd = батерията съдържа кадмий

Hg = батерията съдържа живак

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.