

## Ръководство на потребителя за термоподложка Beurer НК 145



### I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. нагревателен елемент
- 1 бр. контролер
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба. Не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържа.

### II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

НК 145 Cosy Weight Green Planet е иновативна термоподложка, създадена да осигури релаксация и усещане за спокойствие чрез нежна, обгръщаща топлина. Благодарение на пълнежа от стъклени топчета, тя прилепва плътно към тялото и разпределя топлината равномерно, като осигурява оптимално затопляне и продължително отдаване на топлина. Лекият натиск, който създава, допринася за отпускане на мускулите и постигане на пълноценен комфорт. Изработена с грижа към природата, горната и долната част на подложката са направени от 100% рециклирани материали, а корпусът на контролера съдържа около 50% рециклирана пластмаса. Подложката разполага с 6 осветени температурни степени, които позволяват прецизно регулиране според вашите предпочитания, както и с функция за бързо загряване. Вградената система за безопасност на Beurer следи температурата и при необходимост изключва уреда, а автоматичното изключване след 90 минути осигурява допълнителна защита и спокойствие при употреба. Материята е дишаща, мека и щадяща кожата, сертифицирана по Oeko-Tex® Standard 100, което гарантира безопасност при контакт с кожата. Може да се пере в пералня при 30°C на щадяща програма, за лесна поддръжка и дълготрайна хигиена. НК 145 Cosy Weight Green Planet е перфектният избор за моментите, когато търсите топлина, комфорт и истинска релаксация.

Този уред е предназначен само за затопляне на човешкото тяло.


### III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Устройството не трябва да се използва от хора, които не усещат топлина или от други уязвими лица, които може да не са в състояние да реагират на прегряване – например диабетици, лица с кожни увреждания в зоната на приложение (вследствие на заболяване или белези), както и след прием на болкоуспокояващи или алкохол.
- Това устройство не трябва да се използва от малки деца (0–3 години), тъй като те не могат да реагират на прегряване.
- Устройството може да се използва от деца над 3 и под 8 години само под наблюдение. В този случай контролерът винаги трябва да е настроен на най-ниската температурна степен.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само под наблюдение или след като са били инструктирани как да използват устройството безопасно, както и относно рисковете, свързани с употребата му.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Това устройство не е предназначено за използване в болници.
- Устройството е предназначено само за домашна или лична употреба и не бива да се използва за търговски цели.
- Не пробждайте устройството с карфици, игли или други остри предмети.
- Не използвайте уреда, когато е прегънат или намачкан.
- Не използвайте устройството, ако е мокро.
- Това устройство трябва да се използва само с контролер, посочен на етикета.
- Това устройство трябва да се включва само към мрежово напрежение, посочено на етикета.

- Ако устройството се използва в продължение на няколко часа, препоръчваме да зададете най-ниската температурна настройка на контролера, за да се избегне прегряване на тялото и съответно възможни изгаряния на кожата.
- Електрическите и магнитните полета, излъчвани от това устройство, могат да попречат на работата на вашия пейсмейкър. Въпреки това те са значително под допустимите граници: интензитет на електрическото поле: макс. 5000 V/m, интензитет на магнитното поле: макс. 80 A/m, магнитна индукция: макс. 0,1 милитесла. Затова се консултирайте с вашия лекар и с производителя на пейсмейкъра, преди да използвате това устройство.
- Не дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте рязко кабелите.
- Ако стъклени топчета изпаднат поради повреда на продукта, спрете да го използвате. Никога не ги поглъщайте. При поглъщане веднага се обърнете към лекар.
- Не излагайте контролера и кабелите на пряка слънчева светлина.
- Когато устройството е включено:
  - не поставяйте остри предмети върху него,
  - не поставяйте източници на топлина, като грейки с гореща вода или подобни.
- Електронните компоненти в контролера се нагряват по време на работа. Поради това той не трябва да се покрива или поставя върху нагревателния елемент, когато устройството е включено.
- Оставайте устройството да се охлади, преди да го приберете.
- За да избегнете силно намачкване на устройството, не поставяйте предмети върху него, докато се съхранява.
- Ако имате въпроси относно употребата на нашите устройства, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

#### IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Щепсел за захранване
2. Контролер
3. Бутон за вкл./изкл. (включване = I/изключване = 0)
4. Бутон за настройване на температурата
5. Осветен дисплей за температурни настройки
6. Конектор

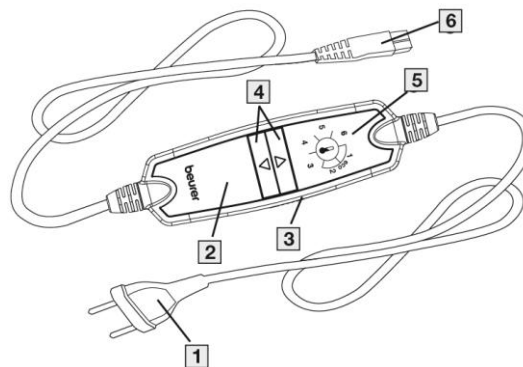

#### V. УПОТРЕБА


##### Безопасност

- Устройството е оборудвано със система за безопасност. Тази сензорна технология осигурява защита от прегряване по цялата повърхност на нагревателния елемент, като автоматично изключва устройството при повреда. Ако системата за безопасност е изключила устройството, контролерът вече няма да светне по никакъв начин, дори при включване.
- Моля, имайте предвид, че по съображения за безопасност устройството не може да се използва повторно след настъпване на повреда и трябва или да бъде изхвърлено или изпратено на посочения сервизен адрес.
- При никакви обстоятелства не свързвайте дефектния нагревателен елемент с друг контролер от същия тип. Това също би задействало постоянно изключване от защитната система в контролера.

##### Първоначална употреба

Уверете се, че нагревателният елемент не се нагъва или прегъва по време на употреба.

1. Най-напред свържете контролера към нагревателния елемент, като поставите конектора.
2. След това включете щепсела в електрическия контакт.

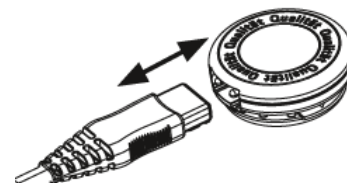

##### Включване

Превключете бутона за вкл./изкл. **3** от дясната страна на контролера на позиция „I“ (включено). При включване дисплеят с температурните настройки светва.

**Бележка:** Редовно леко разклащайте подложката, за да се разпределя пълнежът равномерно.

## Настройка на температурата

За да увеличите температурата, натиснете  $\Delta$  бутона [4]. За да намалите температурата, натиснете  $\nabla$  бутона [4].

Степен 1: минимална топлина;

Степен 2-5: индивидуална настройка на топлината;

Степен 6: максимална топлина.

**Бележка:** Най-бързият начин за затопляне на устройството е първоначално да се избере най-високата температурна степен.

**Бележка:** Устройството разполага с функция за бързо загряване, която позволява то да се загрее бързо през първите 10 минути.

## Автоматично изключване

Термоподложката е оборудвана с функция за автоматично изключване. Тя прекъсва подаването на топлина приблизително 90 минути след началото на употреба. Част от показаните температурни настройки на контролера започват да мига. За да включите отново устройството, първо превключете страничния бутона за вкл./изкл. [3] в позиция „0“ (изключено). След около 5 секунди е възможно отново да го включите.



## Изключване

За да изключите устройството, превключете бутона за вкл./изкл. [3] в позиция „0“ (изключено). Дисплеят с температурните настройки ще изгасне.

**Бележка:** Ако устройството не се използва, превключете бутона за вкл./изкл. [3] в позиция „0“ (изключено) и извадете щепсела от контакта. След това откачете контролера от нагревателния елемент, като издърпате конектора.

## VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

### Почистване

Преди почистване винаги първо изваждайте щепсела от контакта. След това откачайте контролера от нагревателния елемент, като издърпвате конектора. Контролерът никога не бива да влиза в контакт с вода или други течности, тъй като това може да го повреди.

- За почистването на контролера използвайте суха кърпа без власинки. Не използвайте химически или абразивни почистващи препарати.
- Малки петна по нагревателния елемент могат да бъдат премахнати с влажна кърпа и, ако е необходимо, с малко течен препарат за деликатно пране.

Моля, обърнете внимание, че нагревателният елемент не трябва да се почиства с химикали, да се изцежда, да се суши в сушилня, да се прекарва през валак или да се глади.

- Нагревателният елемент може да се пере в пералня.
- Задайте на пералнята програма за особено деликатно пране при 30°C (програма за вълна). Използвайте препарат за деликатно пране и го дозирайте според инструкциите на производителя.

Моля, обърнете внимание, че честото пране на термоподложката влияе негативно на продукта. Затова тя може да се пере в пералня най-много 10 пъти през целия ѝ експлоатационен живот.

- Веднага след изпиране оформете нагревателния елемент в оригиналните му размери, докато е още влажен, и го разстелете хоризонтално върху сушилник за дрехи, за да изсъхне.
- Не използвайте щипки или други подобни предмети, за да прикрепяте нагревателния елемент към сушилника за дрехи. В противен случай нагревателният елемент може да се повреди.
- Не свързвайте контролера към нагревателния елемент, преди конекторът и самият нагревателен елемент да са напълно сухи.

**Важно:** Никога не включвайте устройството, за да го изсушите! Това може да доведе до токов удар.

### Съхранение

Ако не възнамерявате да използвате устройството за по-дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка. За тази цел откачете контролера от нагревателния елемент, като издърпате конектора.

## Ремонти

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

## VII. СЪПКИ ПРИ ПРОБЛЕМИ

<b>Проблем</b>	Температурните настройки не светят, въпреки че: <ul style="list-style-type: none"><li>– контролерът е правилно свързан с нагревателния елемент,</li><li>– щепселът е включен в работещ контакт,</li><li>– бутонът за вкл./изкл. <b>3</b> е превключен в позиция „I“ (включено).</li></ul>
<b>Възможна причина</b>	Системата за безопасност е изключила устройството за постоянно.
<b>Решение</b>	Изпратете нагревателния елемент и контролера за сервизно обслужване.

## VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



## IX. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

**Производител:** Beurer GmbH

**Адрес:** Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

**Телефон:** +497 313 9890

**Имейл:** [customerservice@beureruk.com](mailto:customerservice@beureruk.com)

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).