

Ръководство на потребителя за масажор Beurer MG 44



I. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. ръчен масажор с функция за инфрачервена топлина
- 3 бр. сменяеми масажни приставки
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Beurer MG 44 е практичен и ефективен масажор 2-в-1, който отпуска и облекчава напрежението в мускулите чрез нежен вибрационен масаж с възможност за включване на инфрачервена топлина, осигуряваща допълнителен комфорт и релаксация. Благодарение на въртящата се на 180° масажна глава и дръжката с 3-степенно регулиране, уредът позволява гъвкава и персонализирана употреба според нуждите на тялото. С включените 3 висококачествени приставки, 1 масажна програма и 2 нива на интензивност, масажорът е идеален за целенасочен точков масаж на гърба, врата, раменете, ръцете и краката. Голямата масажна и нагряваща повърхност допринася за оптимален ефект, а нехлъзгащата се дръжка гарантира стабилен и удобен захват по време на употреба.

Това устройство е предназначено за масаж на отделни части на тялото ви. Важно е да знаете, че то не е заместител на медицинското лечение. Ако не сте сигурни, че масажорът е подходящ за вас, моля консултирайте се с Вашия лекар. Уредът е предвиден само за домашна/лична употреба и не трябва да се използва за търговски цели. Всякаква неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или некоректна употреба.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Тъй като устройството има гореща повърхност, лицата с повишена чувствителност към топлина трябва да бъдат особено внимателни при използването му.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Не използвайте този уред:
 - върху животни;
 - ако страдате от медицинска аномалия или имате някакво нараняване в зоната, която ще масажирате (например дискова херния или отворени рани);
 - в зоната на гърдите при хора, които имат пейсмейкър. За останалите част от тялото се консултирайте с лекар;
 - върху подута, изгорена или разранена кожа;
 - върху порязвания, капилляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания;
 - по време на бременност;
 - върху лицето (очите), върху гърлото (ларинкса) или върху други чувствителни части на тялото;
 - докато спите или ако сте под въздействието на алкохол или друг упойващи вещества.
 - в превозно средство или на публично място.
- Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред в следните случаи:
 - ако страдате от тежко заболяване или се възстановявате след операция;
 - ако имате поставен пейсмейкър, импланти или други помощни средства;
 - ако страдате от тромбоза или диабет;
 - ако изпитвате болка с неизвестен произход.

- Използвайте уреда само при мрежовото напрежение, посочено върху уреда.
- Не използвайте уреда по време на буря.
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Не мокрете уреда и кабела му. Използвайте уреда само на закрито и в сухи стаи, никога в баня, вана, сауна или под душа.
- Ако уредът попадне във вода, не го вадете с ръка – риск от токов удар! Веднага изключете уреда от контакта.
- Масажорът не трябва да се използва за повече от 20 минути и преди повторна употреба трябва да се остави да се охлади поне 15 минути.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Никога не използвайте уреда под покривало, като одеяло, възглавница или други подобни.
- След употреба и преди почистване уредът винаги трябва да бъде изключен и изваден от електрическото захранване.
- Уверете се, че в уреда не могат да попаднат косми.
- Дръжте уреда далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина (печки, радиатори и т.н.).

IV. ПРЕГЛЕД НА УРЕДА

1. Масажна повърхност с инфрачервена светлина
2. Въртящо се съединение за завъртане на масажната глава (180°)
3. Бутон за регулиране на дръжката
4. Бутон за загряване
5. LED дисплей
6. Бутон за вкл./изкл.
7. Релефен масажен накрайник
8. Накрайник четка
9. U-образен накрайник

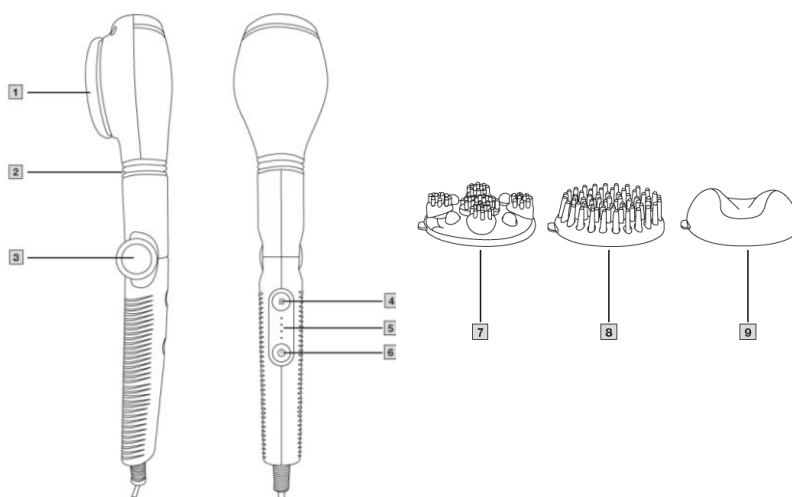

V. УПОТРЕБА




Първоначална употреба:

- Отстранете опаковката.
- Проверете уреда, мрежовия щепсел и кабела за повреди.
- Свържете уреда към електрическата мрежа. Уредът е в режим на готовност (долната LED индикация „Lo“ на LED дисплея [5] започва да мига в синьо).

Употреба:

Масажът може да се извършва с или без масажен накрайник. За целта изберете желан от вас масажен накрайник. При използване на допълнителната функция за загряване поставените масажни накрайници пречат на ефекта на топлинната обработка. Поради това уредът трябва да се използва без загряване, когато е поставен масажен накрайник.

Устройството разполага с общо три приставки за масаж.

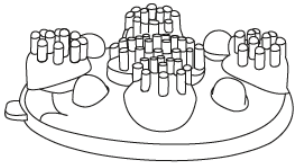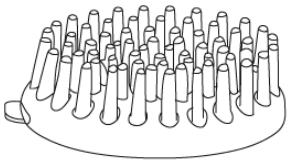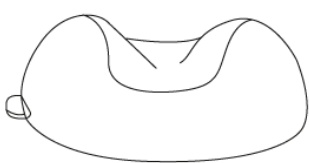		
Релефен масажен накрайник	Накрайник четка	U-образен накрайник
Идеален за големи участъци от тялото.	Идеален за големи участъци от тялото.	Идеален за области на тялото с кости или сухожилия – например гръбначен стълб, ахилесово сухожилие


Начало на масажа:

Уредът разполага с функция за автоматично изключване и се изключва самостоятелно след 20 минути работа.


1. При желание поставете масажен накрайник върху инфрачервената/масажната повърхност [1].
2. Използвайте въртящото се съединение [2] и бутона [3], за да зададете предпочитания ъгъл.
3. Включете кабела в подходящ контакт.
 - ↳ Долната LED индикация („Lo“) на LED дисплея [5] започва да мига в синьо. Уредът е в режим на готовност и е готов за употреба.
4. Натиснете за кратко бутона за вкл./изкл. [6].
 - ↳ Долната LED индикация („Lo“) на LED дисплея [5] започва да свети непрекъснато. Уредът стартира вибрацията на ниско ниво на интензивност.
5. Изберете предпочитаната масажна настройка чрез кратко натискане на бутона за вкл./изкл. [6].
 - ↳ Текущата масажна настройка се показва на LED дисплея [5]:

„Lo“ = Вибрация с ниско ниво на интензивност
„Hi“ = Вибрация с високо ниво на интензивност
„P“ = Вибрационна масажна програма – вибрациите бавно се увеличават и намаляват (като вълна)

6. Използвайте една или двете ръце, за да насочите уреда към областта на тялото, която желаете да масажирате. Можете да седите, да стоите прави или да лежите, като уредът може да се използва както за самостоятелен масаж, така и за масаж на друго лице. Интензивността на масажа може да се променя чрез по-силно или по-леко притискане на масажора. Не масажирайте една и съща част от тялото повече от 3 минути; след това преминете към друга област.
7. За да превключите уреда в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. [6] за 2 секунди.
 - ↳ Долната LED индикация („Lo“) на LED дисплея [5] започва да мига в синьо.
8. След всяка употреба изключвайте кабела от контакта.

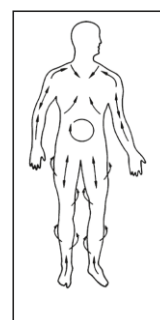

Предна част
на тялото

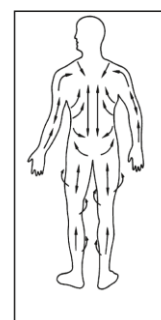

Задна част
на тялото

Функция за загряване:

Функцията за загряване може да се използва самостоятелно или заедно с вибрационната функция. При използване на допълнителната функция за загряване поставените масажни накрайници пречат на топлинното въздействие. Функцията за загряване трябва да се използва само без масажни накрайници.

1. За да включите функцията за загряване заедно с вибрационната функция, натиснете бутона за загряване [4], докато вибрационната функция е активна.
 - ↳ Масажната повърхност започва да се загрява. „H“ започва да свети в червено на LED дисплея [5]. Натиснете отново бутона за загряване [4], за да изключите загряването.
2. За да използвате функцията за загряване самостоятелно, без вибрацията, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. [6] за 2 секунди, за да превключите уреда в режим на готовност. В режим на готовност натиснете бутона за загряване [4].
 - ↳ Масажната повърхност започва да се загрява. „H“ започва да свети в червено на LED дисплея [5]. След няколко минути тя е загряла и готова за употреба.
3. Натиснете отново бутона за загряване [4], за да изключите инфрачервената светлина.
4. Уредът се връща в режим на готовност.

Внимание: Ако инфрачервената/масажната повърхност [1] се нагрива продължително време без контакт с кожата, температурата може да се усети като неприятно висока. Преди употреба винаги проверявайте температурата на инфрачервената/масажната повърхност [1] с върховете на пръстите си. Ако е твърде гореща, краткото изключване на инфрачервената светлина може да намали температурата.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

- Изключвайте уреда и мрежовия щепсел преди всяко почистване.
- Почиствайте уреда само с леко влажна кърпа. Масажните накрайници могат да се почистват с топла сапунена вода. Използвайте само щадящи домакински почистващи препарати. При никакви обстоятелства не допускайте течност да проникне в уреда или принадлежностите.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново.
- Не почиствайте уреда в съдомиялна машина.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или твърди четки.

Съхранение:

Ако няма да използвате уреда за дълъг период от време, съхранявайте го в оригиналната опаковка на сухо място, без да поставяте други предмети върху него.

Ремонти:

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.

**VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ**

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.