

Ръководство на потребителя за масажна вана за крака Beurer FB 35



I. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. масажна вана за крака
- 1 бр. масажна приставка
- 1 бр. приставка за премахване на мазоли
- 1 бр. четка
- 1 бр. Ръководство за употреба

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете и че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля, свържете се с търговеца, от когото сте го закупили. Премахнете всички опаковъчни материали от устройството преди да го използвате.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги запазете за по-късна употреба, не забравяйте да ги направите достъпни за други потребители и спазвайте информацията, която съдържат.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

Насладете се на пълноценен релакс и нежен масаж за вашите крака в домашни условия с масажната вана за крака Beurer FB 35. Уредът е създаден, за да отпусна уморените стъпала и да осигурява усещане за комфорт. Вградената функция за ароматерапия с ароматизиращ филтър позволява добавяне на ароматни есенции за още по-приятно и релаксиращо изживяване. Масажната вана предлага три функции – вибрационен масаж, масаж с мехурчета и поддържане на температурата на водата, които спомагат за отпускане на мускулите и облекчаване на напрежението. Успокояващите инфрачервени светлинни точки и 16-те вградени магнита за магнитна терапия подпомагат кръвообращението и засилват релаксиращия ефект. За цялостна грижа за стъпалата са включени три сменяеми приставки за педикюр, както и свалящи се ролкови масажори за масаж на рефлексните зони на ходилата. Платформата за крака с масажни възелчета допринася за допълнителен комфорт по време на употреба. Практичният дизайн включва удобна дръжка за пренасяне, противоплъзгащи гумени крачета и място за навиване на кабела. Двойната стена осигурява по-добра топлоизолация, а уредът е подходящ за размери на стъпалото до номер 44.

Ваните за крака с топла вода и екстракти от арника, розмарин или морска сол стимулират кръвообращението. Ваните с по-хладка вода и добавка на лавандула или мащерка имат успокояващ ефект и осигуряват облекчение за уморени крака.

Този уред е предназначен единствено за грижа за вашите крака. Предвиден е само за домашна/лична употреба и не трябва да се използва за търговски цели. Всякаква неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна или некоректна употреба.


III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – не позволявайте на децата да играят с него.
- Уредът може да се използва от деца само под наблюдение от възрастен.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Тъй като устройството има гореща повърхност, лицата, които нямат чувствителност към топлина, трябва да бъдат особено внимателни при използването му.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Включвайте уреда само в контакт, защитен от влага, вода и водни пръски.
- Използвайте уреда само при мрежовото напрежение, посочено върху уреда.
- Не използвайте уреда по време на буря.

- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Никога не включвайте уреда в захранването, когато краката ви са във водата.
- Щепселът и захранващият кабел не трябва да влизат в контакт с вода или други течности.
- Използвайте уреда само със сухи ръце и в сухи вътрешни помещения (никога във вана или сауна).
- Никога не потапяйте уреда във вода. Ако уредът падне във вода, не го вадете с ръка. Веднага изключете щепсела от контакта.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Никога не използвайте уреда под покривало, като одеяло, възглавница или други подобни.
- Никога не използвайте уреда в близост до бензин или други лесно запалими материали.
- Не поставяйте уреда върху меки килими или постелки, за да не се запушат отворите за вентилация.
- Дръжте уреда далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина (печки, радиатори и т.н.).
- Уредът не трябва да се включва в електрозахранването по време на пълнене.
- След употреба, преди преместване и преди почистване уредът винаги трябва да бъде изключен и изваден от електрическото захранване.
- Не оставяйте ваната без надзор и я изключете веднага при нужда.
- Не използвайте този уред:
 - ако има промени по краката, причинени от заболяване или травма (например открити рани, брадавици, гъбична инфекция),
 - върху животни,
 - не използвайте за повече от 40 минути (риск от прегряване) и оставете уреда да изстине поне 15 минути преди следваща употреба.
- Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред в следните случаи:
 - ако не сте сигурни дали уредът е подходящ за вас,
 - ако страдате от тежко заболяване или се възстановявате след операция на краката,
 - ако страдате от тромбоза, диабет, заболявания на краката или вените (например разширени вени или възпаление на вените),
 - ако изпитвате болка с неизвестен произход.

IV. ПРЕГЛЕД НА УРЕДА

1. Защита от пръски
2. Функционален бутон 
3. Функционален бутон 
4. Маркер за нивото на пълнене
5. Лента за образуване на мехурчетата
6. Приставка за масажни ролки
7. Сменяеми приставки за педикюр
 - а. Приставка за премахване на мазоли
 - б. Четка
 - в. Масажна приставка
8. Инфрачервени светлинни точки
9. Гумените крачета (отдолу на уреда)
10. Платформа за краката с масажни възелчета
11. Капак на филтъра
12. Подвижен ароматизиращ филтър
13. Държач за кабела (отдолу на уреда)

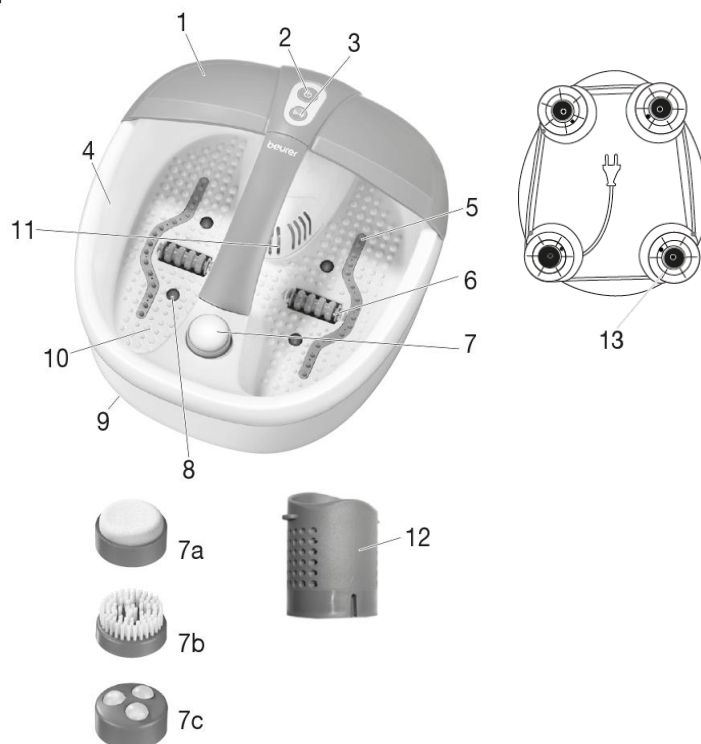

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба:

- Отстранете опаковката.
- Проверете уреда, мрежовия щепсел и кабела за повреди.
- Преди да включите ваната за крака, напълнете я до маркера за ниво на пълнене (приблизително 2–3 см вода). Платформата за крака трябва да бъде напълно покрита с вода.
- Поставете ваната за крака на стабилна и равна повърхност.

Употреба:

Настанете се удобно на стол и поставете краката си на платформата за крака, като упражните лек натиск. Никога не стойте изправени във ваната за крака. Гумените крачета на дъното предотвратяват плъзгането на уреда.

Уредът разполага с две масажни функции:

- Функция 1 : масаж с мехурчета, инфрачервена светлина и регулиране на температурата на водата;
- Функция 2 : активиране на вибрационен масаж.

Масаж с мехурчета, инфрачервена светлина и регулиране на температурата

- Натиснете бутона „“, за да включите масажа с мехурчета (с инфрачервена светлина и регулатор на температурата).
- Натиснете същия бутон, за да изключите масажа с мехурчета.

Тези функции работят само заедно.

Опционален вибрационен масаж

Докато масажът с мехурчета, инфрачервената светлина и регулаторът на температурата са включени, можете да активирате и вибрационния масаж. Вибрационният масаж функционира само когато масажът с мехурчета е включен. Не може да се използва самостоятелно.

- Натиснете бутона , за да активирате вибрационния масаж.
- Натиснете същия бутон, за да го изключите.

Масажни ролки

Преместването на краката напред-назад върху двете масажни ролки, интегрирани на дъното на ваната, осигурява специален масажен ефект. Масажните ролки могат да бъдат премахнати чрез леко издърпване нагоре. При поставяне на ролките се уверете, че фиксиращите точки са насочени надолу.

Сменяеми приставки

Поставете избраната приставка върху предвидения държач. Четката стимулира рефлексните зони на ходилата. Масажната приставка осигурява успокояващ масаж и подпомага кръвообращението. Приставката за премахване на мазоли се използва за отстраняване на мъртва кожа и мазоли.

Магнитно поле и инфрачервена светлина

Ваната за крака е оборудвана с 16 магнита и 4 инфрачервени светлинни точки, интегрирани на дъното. Те подпомагат кръвообращението и стимулират рефлексологичните точки.

Подвижен ароматизиращ филтър

Подвижният ароматизиращ филтър позволява лесно добавяне на спа продукти, като кристали за вана, соли и други. Махнете капака на филтъра [11], като го издърпате нагоре. Извадете ароматизиращия филтър [12]. Добавете спа продуктите до нивото на маркера вътре във филтъра/под първата линия от отвори. Поставете филтъра обратно под капака, като се съобразите със стрелките върху филтъра и ваната, като те трябва да сочат една към друга. Поставете обратно капака на филтъра. Филтърът може лесно да се извади и почисти след употреба. Изплакнете го с чиста вода. Следете маркера за ниво на филтъра и не го превишавайте. Някои спа продукти могат да образуват много пяна в комбинация с масажа с мехурчета. Поради това не оставяйте ваната за крака без надзор и я изключете веднага, ако се образува излишна пяна.

Бележка:

Масажирането на определена точка на стъпалото може да влияе на съответния орган в тялото. Препоръчваме да се запознаете с подходяща литература и да се консултирате с лекар, преди да използвате масаж на рефлексните точки за постигане на желан ефект.

След употреба излейте водата през тясната страна на ваната за крака.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване:

След употреба изплакнете уреда с вода. Ваната за крака може да се почиства с щадящ, непенещ се почистващ препарат за домакинството, например с неутрален оцет. За да изсушите въздушната линия след почистване, включете функцията за масаж с мехурчета за приблизително 10 секунди. Изтрийте с кърпа капките, които могат да появят.

- Не позволявайте на вода да проникне в корпуса на ваната.
- Съхранявайте ваната в оригиналната опаковка на сухо място.
- Не оставяйте уреда отворен за продължително време.

Ремонти:

Само специализиран персонал може да извършва ремонт на електрически уреди. При никакви обстоятелства не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Това може да доведе до неправилна работа на уреда и да създаде сериозен риск за безопасността. За ремонт, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ или с оторизиран търговец. Неспазването на тези указания води до анулиране на гаранцията.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Производител: Beurer GmbH

Адрес: Soeflinger Strasse 218

89077 Ulm, Germany

Телефон: +497 313 9890

Имейл: customerservice@beureruk.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.